


# Goldtrace™

Fetale EKG Ableitung

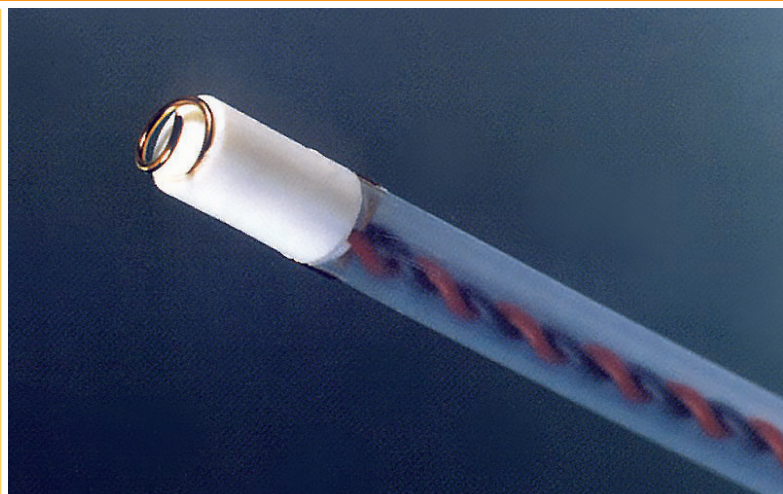

## Die Herausforderung

Um während der Entbindung richtige Entscheidungen treffen zu können, werden kontinuierlich präzise Informationen über den fetalen Status benötigt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Signalqualität entscheidend für die Qualität der Aufzeichnungen und damit die Entscheidungsfindung ist.

## Die Lösung

Goldtrace™ ist die Erste und Einzige Kopfschwartenelektrode (KSE) die speziell zur Anwendung des ST-Analyse Verfahrens mit dem STAN™ entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen KSE's, die ausschließlich zur Ableitung der fetalen Herzfrequenz dienen, ist die Goldtrace™ dafür entwickelt, das gesamte fetale EKG abzuleiten. Die Spirale der Elektrode und die Anschlüsse sind mit Gold beschichtet und bieten eine Signalqualität der Spitzenklasse. Die Goldtrace™ kann auch als Standard CTG-Elektrode eingesetzt werden.

## Die Vorteile - Eindeutige und verlässliche Ableitung

Die einzigartige Goldbeschichtung hat in umfassenden Versuchen und Studien gezeigt, dass die Ableitungen und Aufzeichnungen des fetalen EKG's kontinuierlicher, verlässlicher und eindeutiger sind.

## Einfach und unkompliziert anzuwenden

Die Goldtrace™ verfügt über eine weiche und biegsame Applikationshilfe, die sich bequem in die richtige anatomische Position einstellen lässt. Die Technik zur Applikation ist einfach und schnell zu erlernen. Es gibt nur noch einen Anschluss an der KSE zum verwechslungsfreien Anschließen am Patientenanschluss. Die Goldtrace™ kann als Einzige KSE mit dem entsprechenden Adapterkabel für alle CTG-Systeme eingesetzt werden.

## Geprüfte Sicherheit

Vollständig isolierte und abgeschirmte Ableitungskabel mit dem Patentanschluss, der verwechslungsfrei an dem Patientenanschlusskabel adaptiert wird. Die Spiralelektrode ist durch eine einfach zu entfernende Kappe geschützt. Dadurch werden Verletzungen an der Verpackung und beim Entnehmen sicher verhindert. Entspricht den Europäischen Sicherheitsrichtlinien, sowie der Amerikanischen FDA.

## Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.
GoldTrace™ - Kopfschwartenelektrode	NE1001
Biotrace Hautelektrode f. STAN® S21/ S31 CTG System	NE1002
F-EKG Kabel für goldtrace™ Kopfschwartenelektrode in Verbindung mit STAN® S41	NE300164
STAN® F22 Anschlusskabel für die Kopfschwartenelektrode	NE2001
CTG Anschlussadapterkabel f. Phillips	NE2016
goldtrace plus™ Adapterkabel für STAN® S21/S31	NE1950
goldtrace plus™ Adapterkabel für Philips CTG Systeme	NE1951
goldtrace plus™ Adapterkabel für Corometrics 115/118/119/170 CTG Systeme	NE1952
goldtrace plus™ Adapterkabel für Huntleigh (Sonicaid) CTG Systeme	NE1954